


Enceinte de Hood

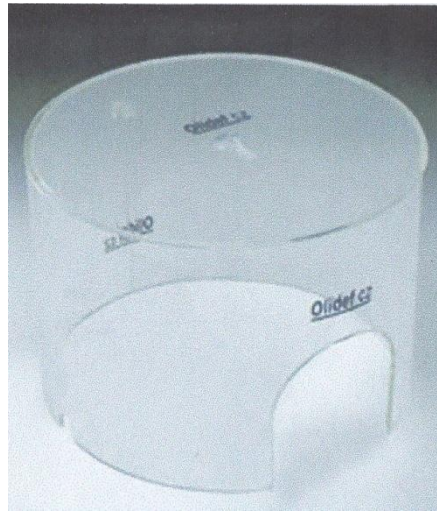

- Enceinte en acrylique transparent pour une oxygénothérapie fiable, sûre et sans danger pour le nouveau- né.
- Structure cylindrique avec trois entrées : une pour la tête du bébé et deux petites ouvertures pour empêcher l'accumulation du gaz carbonique
- Couvercle de l'enceinte démontable avec orifice pour introduction des tubes
- Orifice pour valve à l'arrière de l'enceinte avec déflecteur pour une distribution de la concentration d'oxygène évitant l'incident direct avec le petit patient
- Disponible en Petit, Moyen et Grand modèle.
- **Petit modèle** : pour prématuré/ nouveau- né de moins d'un kilogramme.
- **Moyen modèle** : pour prématuré/ nouveau né entre 1 Kg et 3,6 Kg
- **Grand modèle** : pour prématuré/ nouveau né de plus de 3,6 kg
- **Certifié CE et ISO**
- **Marque : OLIDEX (Brésil)**